

## SELLADORAS MÉDICAS



Calentamiento simultáneo con calentadores dobles, temperatura ajustable, protección automática de temperatura ultraalta, alarma automática de temperatura baja; - Tiene las ventajas de una velocidad de calentamiento rápida, un rendimiento estable y una tasa de reparación baja; - El cortador de doble filo incorporado asegura cortes suaves

# MD-500

## Características

### Facil Uso

- Uso seguro y operación conveniente

### Velocidad de calentamiento

- Rápida, un rendimiento estable y una tasa de reparación baja





### Cortador

- De doble filo incorporado asegura cortes suaves y suaves.

### Calentamiento simultáneo

- Con calentadores dobles, temperatura ajustable, protección automática de temperatura ultraalta, alarma automática de temperatura baja

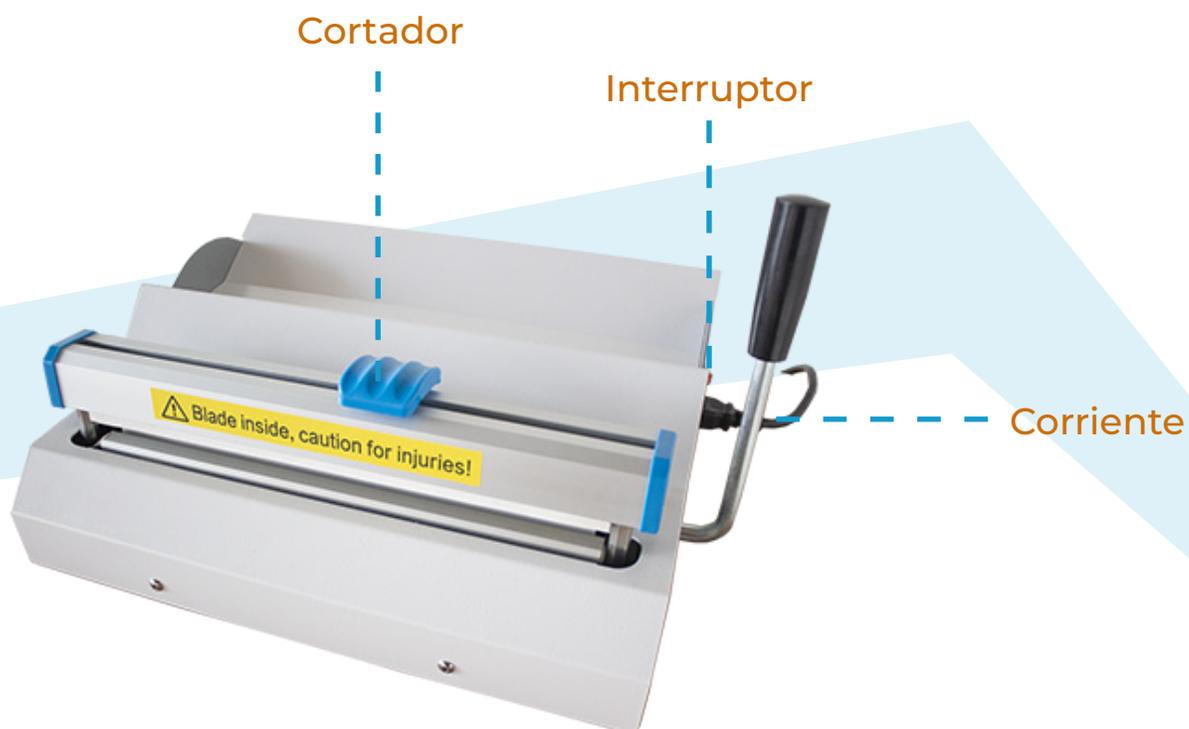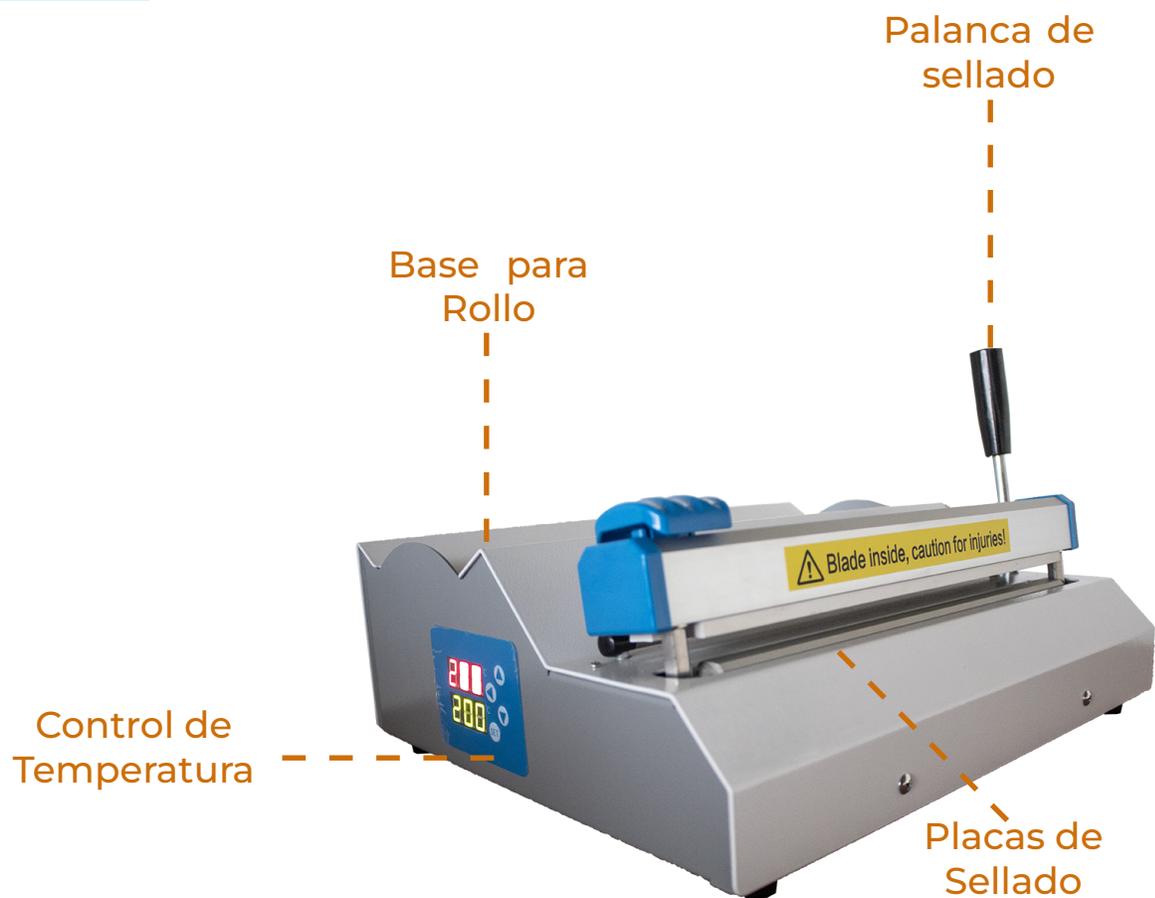

## Parámetros

	MD-500A	MD-500B
Espesor de sellado	1 cm	1 cm
Longitud máx. de sellado	30 cm	40 cm
Efecto de línea de sellado	forma de ashurado	
Potencia	500 w	550 w
Voltaje	110/120 V, 60 Hz	110/120 V, 60 Hz
Dimensiones externas	360x330x150 mm	460x330x150 mm
Peso	9Kg	13Kg

Control a través de microprocesador por la operación de la máquina, con opción para personalización de parámetros, función para análisis de datos.

La excelente estructura y los materiales exteriores aseguran su durabilidad.

# KMN100

## Características

### Controlador de temperatura

- Puede alcanzar una precisión de control de temperatura de  $\pm 1\%$ , temperatura de trabajo: configuración arbitraria de  $60 \sim 220 \text{ }^\circ\text{C}$ ;

### Diseño de calefacción

- Alta velocidad, temperatura ambiente  $\sim 180 \text{ }^\circ\text{C}$  calefacción solo 40S;



### Sistema de presión

- Presión constante flotante diseñado para satisfacer las necesidades de sellado de bolsas de papel y plástico, bolsas de papel tridimensional y bolsas de papel

### Elementos calefactores


- De cerámica plana avanzados para combustión en seco, resistencia a altas temperaturas, larga vida útil y alta eficiencia térmica, sistema de refrigeración auxiliar automático.



## Parámetros

	KMN100
Ancho de sellado	12mm, con 2 líneas de sellado
Borde de sellado	ajustable de 0 a 35 mm
Velocidad de sellado	10 m / min; control automático de arranque de bandas
Potencia:	110V, 60Hz, 500W
Dimensiones externas	490 × 260 × 136mm (largo * ancho * alto)
Peso	15 kg

El sellado cumple con los requisitos de la Norma YY/T 0698.5-2009



# CONTACTO



55 2162 7328



ventas@global-store.mx



<https://global-store.mx/>



55 6415 5704

A decorative graphic consisting of a large orange circle on the left, a smaller light blue circle overlapping its top-right edge, and a light blue arrow-like shape pointing from the blue circle towards the bottom right.

**GlobalStore**